

icoelle

ノーズスタイル



取扱説明書

保管用

保証書付

製品定格

MODEL:INS-10

INPUT:5V=1A

Li-ion Cell:3.7V 30mAh

MADE IN CHINA

Zyva Studio



HOME PAGE



Instagram



X



Line

KO-01-2504

お買い上げいただき 誠にありがとうございます

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

製品仕様と定格	2
安全上のご注意	3
セット内容と各部の名称	10
お使いになる前に	11
使用方法	13
使用上の注意	16
お手入れ方法	17
保管について	18
Q & A	19
お問い合わせする前に	20
保証とアフターサービスについて	21
保証規約	22
保証書	23

製品仕様と定格

製品名	イコエル ノーズスタイル
型番	INS-10
電源	充電式（リチウムイオン電池内蔵30mAh/3.7V）
定格消費電力	最大0.5W
充電時間(※1)	約90分
電池持続時間(※2)	約50分（1モード10分を5回使用）
材質	PC-ABS樹脂、ABS樹脂、導電性シリコーン
寸法	約W36×D25×H58mm
重量	約16g
セット内容	本体、充電用ケーブル、取扱説明書（保証書付）
生産国	中国

△ 製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

※1 充電時間は付属の充電用ケーブルで充電した際の目安です。

※2 弊社推奨の使用方法に準じます。

実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。

安全上のご注意

- ・ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。
- ・ここに示した説明事項は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。
- ・安全にお使いいただくために色々な絵表示で表しています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、ケガをしったり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

絵表示の意味



禁止



風呂、シャワー室での使用保管禁止



濡れ手で禁止



分解禁止

記号は
してはいけない
こと（禁止）を
表しています。



必ず守る

記号は、しなければならないこと（強制）を表しています。

安全上のご注意(症状について)

警告



禁止

- 次のような方は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。
 - ① 次のような医療機器用電子機器をお使いの方
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み型電子機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器
 - ② 国で定められている指定難病を患っている方
 - ③ 心臓疾患、障害およびその疑いのある方
 - ④ 急性疾患の方
 - ⑤ 悪性腫瘍のある方
 - ⑥ 有熱性疾患、感染症疾患、伝染病疾患の方
 - ⑦ 高血圧や低血圧など血圧に異常がある方
 - ⑧ 重度の動脈瘤、急性静脈瘤のある方
 - ⑨ 貧血病、血友病、血栓病、塞栓病、出血性疾患、結核性の病気を患っている方およびその疑いのある方
 - ⑩ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害、顔面の神経マヒ障害のある方
 - ⑪ 知覚障害や意思表示のできない方
 - ⑫ 皮膚病、接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎、アレルギー体質、ケロイド体質、敏感肌、顔面黒皮症、紫斑になりやすい等皮膚に既往症のある方
 - ⑬ 過去にシリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
 - ⑭ 鼻に疾患がある方および治療中の方、鼻の手術を受けた方
 - ⑮ 強度近視の方、白内障や緑内障の方
 - ⑯ 骨折・骨粗しょう症など骨に異常のある方

安全上のご注意(症状について)



- ⑰発熱、飲酒中、生理中、妊娠中、出産直後、授乳中、極度の疲労、安静が必要な状態の方
 - ⑱脳神経に異常を感じている方（てんかんなど）
 - ⑲ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
 - ⑳鎮痛剤、血糖降下薬、血圧降下薬を服用または注射されている方
 - ㉑17歳以下のお子様
 - ㉒医師の治療を受けている方や薬を服用中の方
 - 次のような部位には使用しないでください。
 - ①鼻以外の部位
 - ②事故や病気のため、体内に金属やプラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
 - ③皮膚が化膿や炎症(化粧品によるかぶれ、日焼けを含む)、かゆみ、切り傷、肝斑、手術(美容整形含む)、出血のおそれのある部位
 - ④過度な日焼けあと、剃毛または脱毛の直後、ピーリング後の部位
 - 次のような方は、必ず医師とご相談の上、使用してください。
 - ①皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
 - ②アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある方や使用に際してお肌に不安のある方
 - ③過去に素肌使用する製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
 - ④敏感肌や肌の弱い方
- ※肌に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください
- ※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください
- ※その他、使用に関して心配な方、ご自身で判断ができない方は使用前に専門医にご相談ください

安全上のご注意(ご使用・保管について)

 禁止	●ご使用前に、本体にキズがないか確認してください。破損している場合は使用しないでください。 ●ご使用前に、必ず操作ボタンなどが正常に動作するか確認してください。 ●運転中、睡眠中に使用しないでください。 ●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。 ●1時間の休憩をはさんで、1日2回までの使用にとどめてください。 ●取扱説明書に記載の使用方法以外で使用しないでください。 ●イヤリングや眼鏡などの金属類、貴金属類のアクセサリ類をつけて使用しないでください。皮膚の炎症などをおこすおそれがあります。 ●万が一、異常な音、におい、煙が出たとき、内部に異物が混入したときは電源をオフにし、お買い上げの販売店まで連絡してください。 ●電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にいれないでください。
 分解禁止	●本製品の分解、改造は絶対にしないでください。機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店に連絡してください。
 風呂、シャワールームでの使用 保管禁止	●お風呂場など、高温多湿の場所やホコリの多い場所で使用・保管しないでください。 けがや故障の原因となります。
 濡れ手で 禁止	●本体・付属品を濡れた手で操作しないでください。 ●本体・付属品を水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。 感電・ショートによる発火・火災のおそれがあります。

安全上のご注意(ご使用・保管について)



必ず守る

- 本製品は鼻専用です。鼻以外の部位には使用しないでください。
- 本製品をお子様・ペットの手の届くところに置かないでください。
けがややけどのおそれがあります。
- 使用中は手で電極部を触らないでください。刺激により、事故や身体のトラブルのおそれがあります。
- 電極部に金属を接触させないでください。感電のおそれがあります。
- 本製品を無理に踏みつけたり、落下させたり、折り曲げるなどの強い衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。
- シリコン素材を使用している為、開封時に若干においがすることがありますが、異常ではありません。
- 本製品は肌に密着させる製品ですので、清潔にしてご使用ください。
(お手入れ方法についてはP.17をご覧ください。)
- 本製品を使用中の部位に、他の方が触れないようにしてください。
- 不快感や痛みを感じるほどむやみに強くしたり、長時間使用しても効果が上がるわけではありません。筋肉疲労や、皮膚のヒリヒリ感ややけどの原因となることがあります。
慣れるまでは、弱いレベルでお試しください。
- 小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本製品で遊ばないようにしてください。
- 本製品以外のEMS機器と併用しないでください。
- 飲食時の使用はお控えください。
- 歯の治療中の方(インプラント・矯正・銀歯等)、歯に詰め物がある方は、レベルを調整して使用してください。EMSの刺激により歯に違和感を覚えることがあります。
- 火に入れないでください。※詳しくはP.18を参照。

安全上のご注意(充電池・充電用ケーブル・充電について)

 必ず守る	● 付属の充電用ケーブル以外に接続しないでください。 火災や発熱、破裂、故障の原因となります。 ● 本体の充電ポートの間に、ピンのような鋭いものや異物を差し込まないでください。 ● 付属の充電用ケーブルを他の機器には絶対に使用しないでください。 火災や感電、故障の原因となります。 ● お手入れの際は必ず充電用ケーブルを本体から抜いてください。
 禁止	● 充電用ケーブルが傷んだり、お持ちのアダプターへの挿し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、火災の原因となります。 ● 充電用ケーブルを加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。 ● 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。 次のようなことは絶対にしないでください。発火・火災のおそれがあります。 ① 加熱や火中投下 ② 高温多湿環境でのご使用、充電、放置 ③ 火気のある環境でのご使用、充電、放置 ④ ホコリやチリの多い環境での放置 ⑤ 直射日光が当たる場所や炎天下の車中など高温になる場所でのご使用、充電 ● もれた液に触らないでください。本製品内部や電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後ただちに医師の診察を受けてください。 失明などの原因となります。

安全上のご注意(充電池・充電用ケーブル・充電について)

リチウムイオン電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)

充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電池の寿命と考えられます。

- 充電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- 長期間使用しないときは、本体を満充電にしてから保管してください。

また3ヶ月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。

長期間充電しなかった場合、充電ができなくなることがあります。

廃棄する場合は

本体には、リチウムイオン電池が内蔵されています。

廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。

条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。

充電用ケーブルはお住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。



Li-ion

セット内容と各部の名称

本体



充電用ケーブル



取扱説明書(保証書付)



お使いになる前に


初めてご使用になる場合や、長期間で使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。

また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

- 1** 本体の充電口の充電口カバーをあげ、付属の充電用ケーブルを挿し込みます。

※必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。

※必ずケーブルの端子部分を持って
抜き差ししてください。

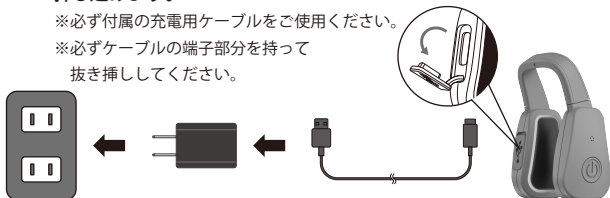

・電源アダプターは付属しておりません。市販の電源アダプターをご使用ください。

定格出力は電圧5Vで、電流は1.0A以上のものをご使用ください。

※充電の際は必ず付属の充電用ケーブルを使用してください。

・パソコンのUSBポート等からの充電はお止めください。


2 電源アダプターを家庭用コンセントに挿し込みます。



- ・充電中はご使用できません。
- ・満充電後は充電用ケーブルを本体から抜いてください。
- ・満充電されるまでの時間は約90分です。
- ・充電中、本体・電源アダプターが多少温かくなりますが異常ではありません。

3 本体の表示ランプが緑色に点滅し、充電が開始されます。

4 充電後、必ず充電口カバーをしっかりと閉めてください。

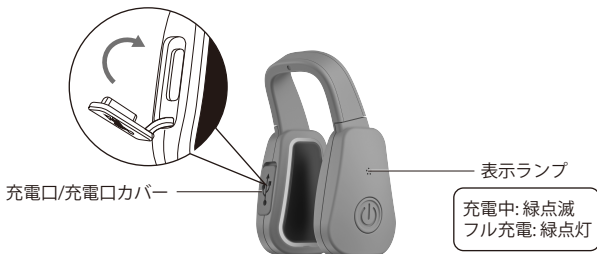

使用方法

1 洗顔後、スキンケアなどで肌を整えてください。

ご使用前に必ず鼻まわりの汚れや皮脂、スキンケアで残った油分などを軽くティッシュで押さえてからご使用ください。
油分が残っていると、刺激を感じにくかったり、装着時にずれてしまうおそれがあります。




2 本体を広げて鼻に装着します。


電源ボタンが顔の右側にくるように、本体の両端を持ち、○を顔側に向け、少し開いて滑らせながら鼻に装着してください。

※電極部を肌にしっかりと密着させてください。

※無理に本体を広げないでください。破損の原因になります。

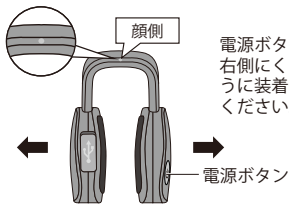

電源ボタンが右側にくるように装着してください。

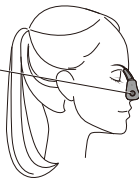

側面



正面

3 本体の電源ボタンを長押しすると、電源が入ります。

電源を入れると、表示ランプとLEDランプが青色に点灯し、EMSレベル1で動作を開始します。



4 電源ボタンを短押しし、EMSレベルを調整します。

ボタンを押す度に、レベルが切り替わります。

レベル1～6からお選びください。

【電源ON▶レベル1▶レベル2▶レベル3▶レベル4▶レベル5▶レベル6▶レベル1】

EMSレベル	表示ランプの色
レベル1～2	青ランプ点灯
レベル3～4	緑ランプ点灯
レベル5～6	赤ランプ点灯

5 プログラムは10分間続き、その後自動で電源が切れます。

途中で切りたい場合は、電源ボタンを長押しすると、電源が切れます。

※全てのランプが消灯します。



- ・ピリピリとした痛みを感じるほど、レベルを上げないでください。
最初は弱いレベルから使用し、無理のないレベルを確認してからレベルをあげてください。
- ・肌が乾燥しているとピリピリ感を強く感じたり、通電しないことがあります。
肌を水で湿らせてから再度お試しください。
- ・鼻周りの油分が残っていると装着時に滑りやすくなる場合がありますので、使用前に軽くティッシュ等で油分をオフしてください。
また、眼鏡の併用時やフィット感に不安を感じる場合は、装着向きを反転させていただいても問題ありません。
ご自身がより安定して使用できる装着方法をお試しください。

使用上の注意

必ず守ること

- ・本製品は鼻専用です。鼻以外の部位には使用しないでください。
- ・1時間の休憩をはさんで、1日2回までの使用にとどめてください。
- ・本製品を使用する際は、洗顔後、スキンケアなどで肌を整えからご使用ください。
- ・本製品を引っ張ったり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・本製品以外のEMS機器と併用しないでください。
- ・本製品は防水性ではありませんので、絶対に水で洗わないでください。故障の原因となります。

使用上のご注意

- ・本体の充電ポートに異物などの付着が残らないよう、お手入れしてください。
故障や事故の原因となります。
- ・充電または使用する際は、本体および充電端子についた汚れは必ずきれいにふきとってください。
故障や事故の原因となります。
- ・使用中に本体が動いてしまうような激しい動きをしないでください。
- ・使用中には本体の電極部を浮かせたりしないでください。思わぬ肌トラブルの原因となるおそれがあります。
- ・本体のボタンを強く押しすぎないでください。
- ・装着する際に、本体を無理に広げないでください。
- ・ご使用後はすぐに鼻から本製品を取り外してください。
そのままにしていると、肌トラブルなどの原因となるおそれがあります。
- ・本製品は筋肉の運動を目的とした鼻専用の製品です。何らかの症状の改善・緩和を目的とした製品ではありません。
- ・肌に赤みなど、何らかの異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。

お手入れ方法

お手入れ方法



絶対に水で洗わないでください。故障の原因となります。

- 1 本体の電源が入っていないことを確認してください。
- 2 乾いた柔らかい布で本体の汚れを拭き取ってください。
 - ・シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤で拭かないでください。
故障や部品の割れ、変色などの原因となります。
 - ・お手入れの際に、スポンジなどのかたい素材のものは使用しないでください。
本製品を傷つけるおそれがあります。
- 3 風通しの良い安定した場所で保管してください。

本製品の廃棄について

本製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。

保管について

本製品は次のような場所に保管してください



水平で
安定した場所



風通しの
良い場所

気温 10～35℃
湿度 20～80%
上記の気温と湿度の場所
※充電時も上記条件で行
ってください。

本製品は次のような場所に保管しないでください

本製品は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。



直射日光の
当たる場所



ホコリや
チリの
多い場所



温度変化の
激しい場所



湿度変化の
激しい場所



火気のある
場所



水に
濡れやすい
場所



揮発性物質
のある場所



冷暖房機器に
近い場所



振動のある
場所



乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。
事故や体調不良の原因となります。

Q&A

電源が入らない	- 電源ボタンを長押ししているか再度ご確認ください。 - 電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。 - 充電ケーブルがささったままになっていないかご確認ください。 - 充電しながらの使用はできません。本製品を傷つけるおそれがあります。
途中で電源が落ちてしまう	10分動作した後に自動で電源が切れます。自動OFFではないかご確認ください。 - 電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。
充電しても使用可能時間が極端に短くなった	1ヶ月以上使用していない場合、充電残量が減っている可能性があります。 - 充電時間が充分でない可能性があります。再度充電してお試しください。 - 保管・使用環境により、お届け時と比べて使用可能回数が変化する可能性があります。
刺激を感じない / 刺激が弱い	- 肌が電極に密着しているかご確認ください。それでも刺激を感じない場合、肌に水をつけて再度お試しください。 - 電池が消耗している可能性があります。充電を行い再度お試しください。 - 電源が入っていない可能性があります。ボタンを長押し、電源が入っているかご確認ください。 - EMSレベル設定が低い可能性があります。EMSレベルを上げてください。
刺激が強すぎる / 刺激が痛く感じる	- EMSレベル設定が強い可能性があります。EMSレベルを下げてください。 - 寒く、乾燥した環境で使用すると、肌が乾燥しやすくなり、電気刺激をビリビリと感じる原因となります。使用場所を温かい環境に変更し、再度お試しください。 - 肌が極度に乾燥していると通電しないことがあります。肌を水で湿らせた状態で再度お試しください。

お問い合わせする前に

使ってはいけないときはありますか？	・発熱時 ・妊娠中 ・生理中 ・出産直後や授乳中 詳しくはP.5をご確認ください。
家族で使用する場合、衛生面は大丈夫ですか？	・複数の方が使用した場合の衛生面を保証しておりません。複数の方で使用するのをお控えください。
使用できない部位がありますか？	・本商品は鼻専用です。それ以外の部位に使用すると、事故やけがの原因になります。
使用した場所が赤くなった	・直ちに使用を止め、肌が正常な状態に戻るまで使用をお控えください。炎症がひかない場合は医師に相談してください。
刺激が歯に響く場合	・EMSレベルを下げてご使用ください。 ・鼻先側に少しずらしてお試ください。
装着してもずれてしまう・フィットしない	・スキンケア後の油分が原因で滑ってしまうケースがあります。ティッシュなどで軽く押さえるだけでなく、ふき取り化粧水や洗顔などで鼻周りの油分をしっかりと除去してからのご使用をお試ください。 ・油分が多い状態でのご使用は、本体のずれや密着性の低下、刺激を感じにくい等の状態につながる可能性があります。 ・眼鏡をご使用中の方やフィット感が合わないと感じる場合は、装着向きを逆にしていただくと、安定しやすくなる場合があります。

保証とアフターサービスについて

保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページになりますので必ず「販売店・購入日」等をご記入の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間となります。この保証は本体のみに適応されます。

※なお、お客様都合による紛失、破損、故障等は保証対象外となります。

アフターサービスを依頼する前に

アフターサービスを依頼する前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、それでも異常がある場合はご購入の販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

故障した場合の連絡について

ご購入の販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

保証期間経過後の対応について

ご購入の販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。ご希望により有償にて代替品交換対応とさせていただきます。

保証部品の最低保有期間について

本製品の補修用部品については、3年を目安に保管しております。原則として本製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は3年です。なお、期限経過後であっても、対応可能な場合もありますので、ご購入の販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。

保証規約

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無償対応とさせていただきます。無償対応をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へ本製品と保証書をご提示いただきお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - ・本製品に付属の充電用ケーブル以外を使用した場合
 - ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - ・不当な修理や改造による故障や損傷
 - ・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
 - ・一般家庭以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷
 - ・製品使用後の汚れ、塗装はがれ、使用による摩耗などの損傷および故障
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障および損傷
 - ・車両、船舶などで配送した場合の故障および損傷
 - ・保証書のご提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合（通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票もしくは購入明細書をご提示ください）
 - ・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
 - ・正規販売店以外（リサイクルショップ・ネットオークション等）で購入した場合
3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。
4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の対応についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へお問い合わせください。

保証期間経過後の対応や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフ

保証書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償対応を行う事をお約束するものです。お買上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店もしくはお客様相談室へ依頼してください。

商品名	イコエル ノーズスタイル		
型番	INS-10		
保証期間	お買上げ日から1年間（本体のみ）		
お買上げ日	年	月	日
※お客様情報	ご住所 〒		
	お名前		
	電話（	）	—
※販売店	販売店名		
	電話（	）	—

※印欄は必ずご記入ください

症状の内容をできるだけ詳しくご記入ください

株式会社ジヴェアスタジオ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11

TEL：0120-998-830 10：00-16：00（土日祝休）