

Zyva Studio

PROFESSIONAL

アブスプレッシャー PRO

取扱説明書

家庭用EMS運動機器



保管用

保証書付

KO-01-2504

お買い上げいただき 誠にありがとうございます

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

製品仕様と定格	2
安全上のご注意	3
セット内容と各部の名称	7
お使いになる前に	8
ご使用方法（ベルトの装着方法①〔背中側に使用する場合〕）	10
ご使用方法（ベルトの装着方法②〔お腹側に使用する場合〕）	11
ご使用方法（リモコンでモード/レベルを調節する）	12
使用例	14
リモコンの電池の交換方法	15
お手入れ方法と注意事項	16
保管について	17
故障かな？と思ったら	18
お問い合わせする前に	20
保証とアフターサービスについて	21
保証規約	22
保証書	23

製品仕様と定格

商品名	ジヴァスタジオ プロフェッショナル アブスプレッシャーPRO
型番	SAB-200
電源	充電式（リチウムイオン電池内蔵1,400mAh/3.7V）
定格消費電力	最大0.5W
充電時間	約180分
電池持続時間(※2)	EMS+温感レベル1(弱):約100分（1モード10分を10回使用） EMS+温感レベル2(強):約80分（1モード10分を8回使用）
材質	【本体】ABS樹脂 【ベルト】ナイロン、ポリウレタン、導電TPU、ABS樹脂、 ポリプロピレン、ポリカーボネート 【リモコン】ABS樹脂
寸法	約W905×D145×H23mm
重量	約247g（本体+ベルト）
適応サイズ	巻き付け周囲：約64～110cm（※ベルト伸縮時）
セット内容	本体、ベルト、リモコン(テスト電池 CR2025付)、 充電用ケーブル、取扱説明書（保証書付）
生産国	中国

△ 製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

※1 充電時間は付属の充電用ケーブルで充電した際の目安です。

※2 弊社推奨の使用 방법에準じます。

実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。

安全上のご注意

- ・ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。
- ・ここに示した説明事項は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。
- ・安全にお使いいただくために様々な絵表示で表しています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、ケガをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

絵表示の意味



禁止



風呂、シャワー室
での使用保管禁止



濡れ手で禁止



分解禁止

絵表示は、
してはいけない
こと（禁止）を
表しています。



必ず守る

絵表示は、しなければ
ならないこと（強制）
を表しています。

安全上のご注意(症状について)

警告



禁止

●次のような方は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

- ① 次のような医療機器用電子機器をお使いの方
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み型電子機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器
- ② 骨折・骨粗しょう症など骨に異常のある方
- ③ 知覚障害や意思表示のできない方
- ④ 発熱、飲酒中、生理中、妊娠中、出産直後、授乳中の方
- ⑤ 安静を必要としている方や体調がすぐれない方
- ⑥ 毛細血管拡張を起こしている方
- ⑦ 17歳以下のお子様
- ⑧ 医師に運動を禁じられている方

●次のような部位には使用しないでください。

- ① 顔、首、頭、胸部及び心臓の近く
 - ② 粘膜、肘、膝などの関節
 - ③ 体内に金属やプラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
 - ④ 皮膚が化膿や炎症(化粧品によるかぶれ、日焼けを含む)、かゆみ、切り傷、肝斑、手術(美容整形含む)、出血のおそれのある部位
 - ⑤ 過度な日焼けあと、剃毛または脱毛の直後、ピーリング後の部位
- ※その他、使用に関して心配な方、ご自身で判断ができない方は使用前に専門医にご相談ください

●次のような方は、必ず医師とご相談の上、使用してください。

- ① 国で定められている指定難病を患っている方
 - ② 心臓疾患、障害およびその疑いのある方
 - ③ 急性疾患の方
 - ④ 悪性腫瘍のある方
 - ⑤ 有熱性疾患、感染症疾患、伝染病疾患の方
 - ⑥ 血圧に異常がある方
 - ⑦ 重度の動脈瘤、急性静脈瘤のある方
 - ⑧ 血行障害のある方
 - ⑨ 皮膚炎等、皮膚に既往症のある方
 - ⑩ 過去に素肌に装着する製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
 - ⑪ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害のある方
 - ⑫ 脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
 - ⑬ 敏感肌や肌の弱い方
 - ⑭ 脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患のある方
 - ⑮ 整形外科的疾患の方(脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、坐骨神経痛など)
 - ⑯ 子宮内膜症や子宮筋腫のある方
 - ⑰ 介護を受けている方、または付き添いなしで日常生活ができない方、その他医師の治療を受けている方や上記以外にとくに体の異常を感じている方
- ※使用前や使用中、肌や身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください

安全上のご注意(ご使用・保管について)

警告

 禁止	●ご使用前に、ベルト部分のほつれ、電極部にキズがないか確認してください。破損している場合は使用しないでください。 ●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。 ●本製品は運動以外の目的で使用しないでください。 ●運転中、睡眠中に使用しないでください。 ●1時間の休憩をはさんで、同一部位1日2回までの使用にとどめてください。 ●取扱説明書に記載の使用以外で使用しないでください。 ●万が一、異常な音、におい、煙が出たとき、内部に異物が混入したときは電源をオフにし、お買い求めの販売店まで連絡してください。
 分解禁止	●本製品の分解、改造は絶対にしないでください。機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店に連絡してください。
 風呂、シャワー室での使用保管禁止	●お風呂場など、高温多湿の場所やホコリの多い場所で使用・保管しないでください。けがや故障の原因となります。
 濡れ手で禁止	●本体・リモコン・充電用ケーブルを濡れた手で操作しないでください。 ●本体・リモコン・充電用ケーブルを水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。感電・ショートによる発火・火災のおそれがあります。

注意

 禁止	●本製品を無理に踏みつけたり、落下させたり、折り曲げるなどの強い衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。 ●不快感や痛みを感じるほどむやみに強くしたり、無理に温度を上げたり、長時間使用しても効果が上がるわけではありません。筋肉疲労や、皮膚のヒリヒリ感ややけどの原因となることがあります。慣れるまでは、弱い設定でお試ください。 ●本製品以外のEMS機器と併用しないでください。 ●可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり、包んだりしないでください。 ●飲食時の使用はお控えください。 ●本製品を使用しながらの運動はしないでください。けがの原因になります。 ●本製品をお子様・ペットの手の届くところには置かないでください。けがややけどのおそれがあります。 ●小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本製品で遊ばないようにしてください。 ●火に入れないでください。※詳しくはP.17を参照。
 必ず守る	●本製品は肌に密着させる製品ですので、清潔にしてご使用ください。(お手入れ方法についてはP.16をご覧ください。) ●ご使用になるときは指輪・イヤリング・ピアス・時計・ネックレスなどの貴金属のアクセサリを身体から外してください。(肌の炎症などをおこすおそれがあります) ●電極部、接続端子に金属を接触させないでください。感電のおそれがあります。

安全上のご注意(充電機・充電用ケーブル・充電について)

警告

 必ず守る	● 付属の充電用ケーブル以外に接続しないでください。 火災や発熱、破裂、故障の原因となります。 ● 本体の充電ポートの間に、ピンのような鋭いものや異物を差し込まないでください。 ● 付属の充電用ケーブルを他の機器には絶対に使用しないでください。 火災や感電、故障の原因となります。 ● お手入れの際は必ず充電用ケーブルを本体から抜いてください。
 禁止	● 充電用ケーブルが傷んだり、お持ちのアダプターへの挿し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電、ショート、火災の原因となります。 ● 充電用ケーブルを加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりしないでください。 火災や感電の原因となります。 ● 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。次のようなことは絶対にしないでください。発火・火災のおそれがあります。 ① 加熱や火中投下 ② 高温多湿環境での使用、充電、放置 ③ 火気のある環境での使用、充電、放置 ④ ホコリやチリの多い環境での放置 ⑤ 直射日光が当たる場所や炎天下の車中など高温になる場所での使用、充電 ● もれた液に触らないでください。本製品内部や電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。

リチウムイオン電池について

- 充電機は消耗品です。(保証対象外)
充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電機の寿命と考えられます。
- 充電機の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。
また3ヶ月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電しなかった場合、充電ができなくなることがあります。

廃棄する場合は

本体にはリチウムイオン充電機が内蔵されています。
廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。
条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。
充電用ケーブルも、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。



Li-ion


セット内容と各部の名称

ベルト

表

面ファスナー（柔らかい面）

本体取付部

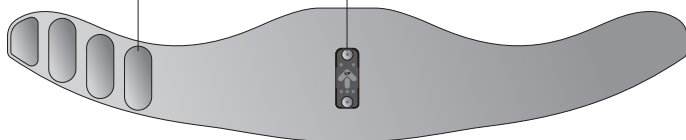


裏

面ファスナー（硬い面）

電極部

温感エリア

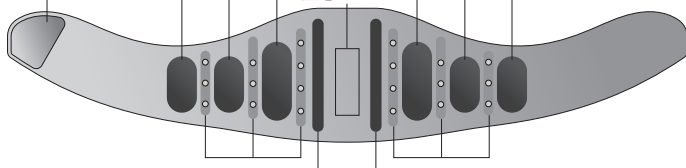

LEDランプ


LEDランプ

ボンシート

本体


表

表示ランプ
電源/モード
レベル
選択ボタン

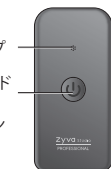

裏

接続端子

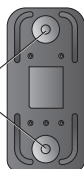


充電ポート（type-C）



リモコン

レベル表示ランプ

出力レベルを
下げる
NORMALモード
（ノーマル）
温感

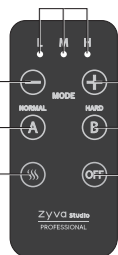

出力レベルを
上げる
HARDモード
（ハード）
電源OFF

充電用ケーブル



取扱説明書（保証書付）




お使いになる前に

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で電源アダプターを取り付け、充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

1 本体の充電ポートに付属の充電用ケーブルを挿し込みます。

※必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。

※必ずケーブルの端子部分を持って抜き差ししてください。

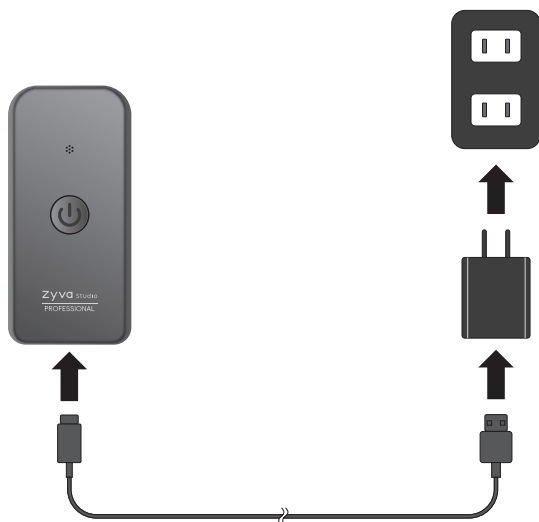

・ 電源アダプターは付属しておりません。市販の電源アダプターをご使用ください。

定格出力は電圧5Vで、電流は1.0A以上のものをご使用ください。

・ 必ず付属の充電用ケーブル(USB-Aポート)適合の電源アダプターをご使用ください。

・ パソコンのUSBポート等からの充電はお止めください。



お使いになる前に

2 電源アダプターを家庭用コンセントに挿し込みます。



- ・充電中はご使用できません。
- ・満充電後は充電用ケーブルを本体から抜いてください。
- ・満充電されるまでの時間は約180分です。
- ・充電中、本体・電源アダプターが多少温かくなりますが異常ではありません。

3 本体の表示ランプが緑色に点滅し、充電が開始されます。




本体の取り付け方法

本体の接続端子とベルトの接続端子を「カチッ」と音が鳴るまで、しっかり装着してください。

※本体をベルトへ取り付けた後、グラグラと動く場合、装着ができておりません。取り付けた後に、本体が動かず、しっかり装着されているか必ず確認してください。

※本体がベルトに装着されていない状態で、ボタン操作しないでください。

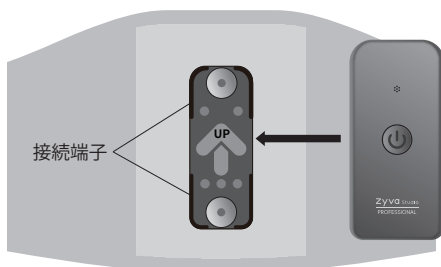


※UPは装着時の向きになります。

ご使用方法(ベルトの装着方法)


1 背骨を中心にウエスト上部に巻き付けます。

前

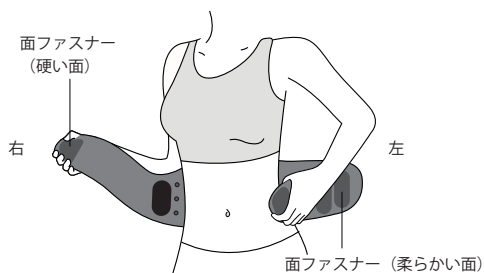



※必ず素肌に電極部を当ててください。
EMSは服の上からは通電しません。

後ろ

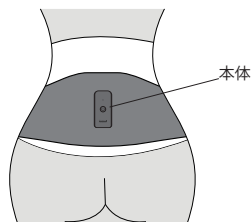

※肋骨にかからないように巻いてください。

2 ベルトの両端を持って引っ張りながら、おへそを隠すように面ファスナーでしっかり固定してください。

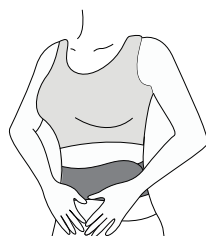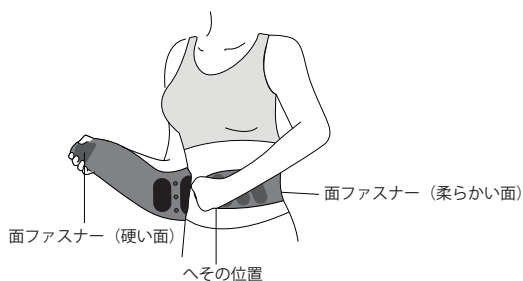

※電極部が肌にしっかり密着するように、
面ファスナーをしっかりと押さえて止めて
ください。




- ・刺激を感じにくい方は、電極部を軽く水で湿らせてからご使用ください。
- ・ベルトを装着してからの操作が難しい方は、本体の電源を入れてからベルトを巻き付けてください。リモコンでのモード・出力レベルの調節はベルトを装着後に行ってください。
- ・腰・お腹・おしり・太もも回りにもご使用可能ですが、必ず素肌に電極部を当ててください。

ご使用方法(ベルトの装着方法②[お腹側に使用する場合])


1 お腹を中心にウエスト上部に巻き付けます。

前

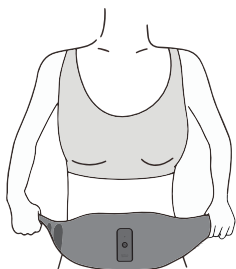

※必ず素肌に電極部を当ててください。
EMSは服の上からは通電しません。


前

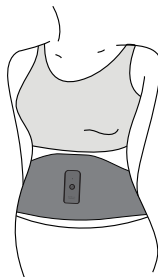

※肋骨にかからないように巻いてください。

2 ベルトの両端を持って引っ張りながら、肌から電極部が浮かないように面ファスナーでしっかり固定してください。


後ろ

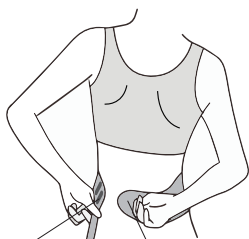

面ファスナー
(硬い面)

面ファスナー
(軟らかい面)

後ろ

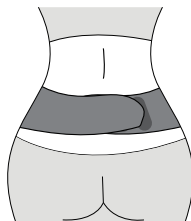

※電極部が肌にしっかり密着するように、
面ファスナーをしっかりを押さえて止めて
ください。



- ・刺激を感じにくい方は、電極部を軽く水で湿らせてからご使用ください。
- ・ベルトを装着してからの操作が難しい方は、本体の電源を入れてからベルトを巻き付けてください。リモコンでのモード・出力レベルの調節はベルトを装着後に行ってください。
- ・腰・お腹・おしり・太もも回りにもご使用可能ですが、必ず素肌に電極部を当ててください。


ご使用方法(リモコンでモード/レベルを調節する)

- 1 本体の電源ボタンを約2秒長押しすると、「ピー」と音が鳴り電源が入ります。



※NORMALモードが自動で開始されます。
※LEDランプが青色に点灯します。
※リモコンで電源を入れることはできません。

- 2 リモコンを使って使用したいモードを短押しで選びます。

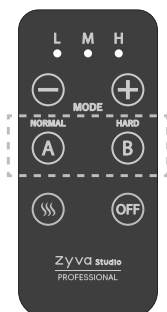


A: NORMALモード

低周波のみでバランスよく筋肉にアプローチするモード

B: HARDモード


低・中・高周波で筋肉に高負荷をかけ、強い強度でトレーニングするモード

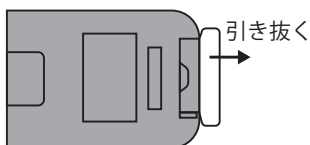

※ご購入後、はじめて使われる場合は、必ず絶縁シートを抜き取ってください。

ご使用方法(リモコンでモード/レベルを調節する)

3 リモコンを使って好みの出力レベルを短押しで選びます。

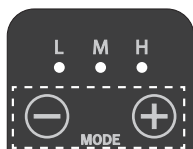

レベル表示ランプについて
L: レベル1～5の時に点灯
M: レベル6～10の時に点灯
H: レベル11～15の時に点灯

※ランプは数秒後に消灯します

レベルを上げたいときは、(+)ボタンを短押しします。
レベルを下げたいときは、(-)ボタンを短押しします。

・出力レベルは1(弱)～15(強)の15段階です。
最大・最小レベルに達すると本体から「ビピッ」という連続音が鳴ります。




4 リモコンを使って好みの温感レベルを短押しで選びます。

ベルトのLEDランプが赤色に点灯します。

リモコンの温感機能ボタンを短押しすることにより、温かさが切り替わります。

※温感OFF状態でEMSのみで 사용할 ことが可能です。


※温感がONになっている状態で本体付近に体重をかけるような姿勢で使 用しない ください。低温やけどのおそれがあります。

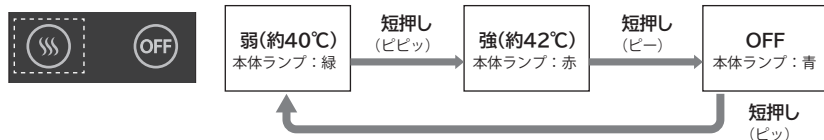

5 プログラムは約10分間続き、その後自動で電源が切れます。


※途中で止めたい場合は、リモコンのOFFボタンを短押しするか、本体の電源ボタ ンを長押しすると電源が切れます。

使用例

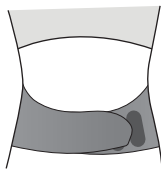


①背中側に使用する場合

360° バランスよくお腹周りの
筋肉を鍛えたい方

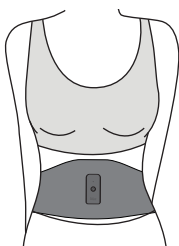


②お腹に使用する場合

お腹（下腹）を重点的に鍛
えたい方

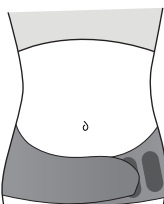

③骨盤まわりに

骨盤やお尻の筋肉を鍛えたい方

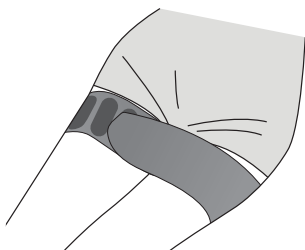

④太ももに使用する場合

運動不足が気になる方・美脚も
目指せたい方


使用時間の目安

10分以上の連続使用は筋肉疲労を起こす可能性があるため、連続使用は
1時間の休憩を挟み、
1日に同一部位2回目までの使用を推奨しています。


リモコンの電池の交換方法

- 1 リモコンの裏面下部左側の突起を押しながらトレイを引き出します。

突起を押しながら
トレイを引き出します。


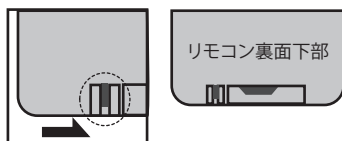


矢印の方向に
親指の力を
入れたまま

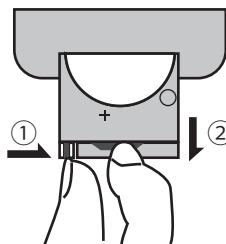

人さし指で引き出す

- 2 CR2025リチウム電池の+面が上になるようにセットし入れ直してください。

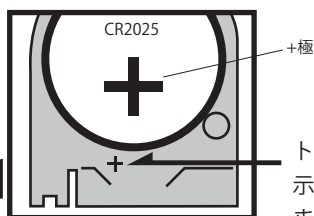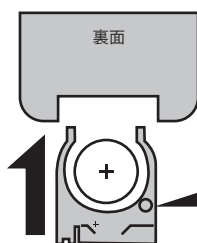

トレイに電池の向きを
示すマークがついてい
ます。

※必ず「カチッ」と音が鳴るまで挿し込んでください。

※トレイを戻すときに向きを反対にしないように注意してください。

突起は裏面の左側にきます。

お手入れ方法と注意事項



- ・水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となります。
- ・ベルトを強く折り曲げたりしないでください。通電不良の原因となります。

1 本体の電源が入ってないことを確認し、ベルトから取り外します。

※濡れた手で取り外さないでください。感電やけがの原因になります。



2 軽く湿らせた布で電極部を拭いてください。

- ・シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤で拭かないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因となります。
- ・お手入れの際に、スポンジなどのかたい素材のものは使用しないでください。本製品を傷つけるおそれがあります。
- ・アイロンはかけないでください。
- ・ファブリックスプレーや消臭スプレーなどの衣類用芳香剤・消臭剤を使用しないでください。通電不良を起こすおそれがあります。

3 風通しの良い安定した場所で保管してください。

本製品の廃棄について

本製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。

保管について

本製品は次のような場所に保管してください



水平で
安定した場所



風通しの
良い場所

気温 10～35℃
湿度 20～80%
上記の気温と湿度の場所
※充電時も上記条件で行
ってください。

本製品は次のような場所に保管しないでください

本製品は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。



直射日光の
当たる場所



ホコリや
チリの
多い場所



温度変化の
激しい場所



湿度変化の
激しい場所



火気のある
場所



水に
濡れやすい
場所



揮発性物質
のある場所



冷暖房機器に
近い場所



振動のある
場所



小さなお子様や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。事故や体調不良の原因となります。

故障かな？と思ったら

電源が入らない	・本体の電源ボタンを長押し(2秒間)しているか再度ご確認ください。 ・本体の電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。 ・充電用ケーブルがささったままになっていないかご確認ください。充電しながらの使用はできません。
途中で電源が落ちてしまう	・本体の電池残量が少なくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。 ・本体の電源ボタンに圧がかかっているか確認してください。長押し状態になっている場合、電源OFFになる可能性があります。
警告音が止まらない/ レベルが上がらない/ 動かなくなった	・肌が極度に乾燥していると通電しないことがあります。電極部を水で湿らせた状態で再度お試しください。 ・10分間動作した後に自動で電源が切れます。 ・電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。
刺激が強すぎる/ 刺激が痛く感じる	・出力レベル設定が強い可能性があります。リモコンの(－)ボタンを短押しして出力レベルを下げてください。 ・寒く、乾燥した環境で使用すると、肌が乾燥しやすくなり、刺激をビリビリと感じる原因となります。使用場所を温かい環境に変更し、再度お試しください。
刺激を感じない/ 刺激が弱い	・肌が極度に乾燥していると通電しないことがあります。電極部を水で湿らせた状態で再度お試しください。 ・電源が入っていない可能性があります。本体の電源ボタンを約2秒長押しし、電源が入っているか確認してください。 ・本体の電池残量が少なくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。 ・肌にクリームなどを塗っている場合は、拭き取ってから再度お試しください。 ・出力レベル設定が低い可能性があります。リモコンの(＋)ボタンを短押ししてレベルを上げてください。
充電しても使用可能時間が極端に短くなった	・長期間(1ヶ月以上)使用していない場合、電池残量が減っている可能性があります。 ・充電時間が充分でない可能性があります。再度充電してお試しください。 ・満充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池寿命と考えられます。 ・保管・使用環境により、お届け時と比べて使用可能回数が増える可能性があります。
リモコンの操作が出来なくなった	・リモコンの電池残量が少なくなっている可能性があります。電池交換後、再度お試しください。 ・本体の電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。

故障かな？と思ったら

左右の刺激の動きが 違う、強さが違う	・筋肉の付き方には左右差があるため、刺激の差を感じることがあります。 ・また、水分量の違いによっても差を感じることがあります。
温かさを感じない	・温感がOFFになっている可能性があります。温感機能ボタンを短押ししてください。 ・温度が低い場合は、リモコンの温感機能ボタンを短押ししてレベルを調整してください。
熱すぎる	・温度が高い場合は、リモコンの温感機能ボタンを短押ししてレベルを下げてください。 ・「弱」でも熱すぎる場合は、ただちに使用を中止し、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください。

お問い合わせする前に

使ってはいけないときはありますか？	・発熱時 ・妊娠中 ・生理中 ・出産直後や授乳中 詳しくはP.4をご確認ください。
使用できない部位はありますか？	・腰・お腹・おしり・太もも回りにはご使用可能ですが、詳しくはP.4をご確認ください。
本体・リモコンをなくしてしまった	・お買い上げの販売店にご連絡ください。
睡眠中に使用できますか？	・睡眠中にはご使用しないでください。
浴室で使用できますか？	・本製品は防水性ではありません。浴室では使用しないでください。
家族で使用する場合、衛生面は大丈夫ですか？	・複数の方が使用した場合の衛生面を保証しておりません。複数の方で使用するのをお控えください。
使用時間、使用頻度の目安はありますか？	・モードを設定してから約10分後に自動で電源がオフになります。1時間以上の休憩をはさんで、同一部位1日2回までのご使用にとどめてください。
電極・LEDランプの跡が残るのですが	・肌の状態や使用環境によっては、跡が残ることがありますが、時間が経つと消えますのでご安心ください。
電極部を拭いたら黒く汚れてしまった	・電極部分を強くこすると色移る場合があります。ケア中に肌が汚れることはありませんのでご安心ください。
ジェルなしで使用できますか？	・ジェルなしで使用できます。電気のビリビリ感がある場合や刺激感を感じにくい場合は、水で電極部を湿らせた状態で再度お試しください。

保証とアフターサービスについて

保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページになりますので必ず「販売店・購入日」等をご記入の上、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間となります。この保証は本体、リモコンのみに適応されます。

※なお、お客様都合による紛失、破損、故障等は保証対象外となります。

アフターサービスを依頼する前に

アフターサービスを依頼する前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、それでも異常がある場合はご購入の販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

故障した場合の連絡について

ご購入の販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

保証期間経過後の対応について

ご購入の販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。ご希望により有償にて代替品交換対応とさせていただきます。

保証部品の最低保有期間について

本製品の補修用部品については、3年を目安に保管しておりますので、原則として本製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は3年です。なお、期限経過後であっても、対応可能な場合もありますので、ご購入の販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。

保証規約

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無償対応とさせていただきます。無償対応をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へ本製品と保証書をご提示いただきお申し付けください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

- ・当製品に付属の充電用ケーブル以外を使用した場合
- ・定格以外のアダプターを使用した場合
- ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
- ・不当な修理や改造による故障や損傷
- ・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
- ・一般家庭以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷
- ・ベルトの使用後の破れ、千切れ、ほつれ、汚れ、使用による摩耗などの損傷、故障
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
- ・車両、船舶などで配送した場合の故障及び損傷
- ・保証書のご提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合(通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票または購入明細書をご提示ください)
- ・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
- ・正規販売店以外(リサイクルショップ・ネットオークション等)で購入した場合

3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。

4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の対応についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へお問い合わせください。

保証期間経過後の対応や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

保証書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償対応を行う事をお約束するものです。お買上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店もしくはお客様相談室へ依頼してください。

商品名	ジヴァスタジオ プロフェッショナル アブスプレッシャーPRO
型番	SAB-200
保証期間	お買上げ日から1年間（本体・リモコンのみ）
お買上げ日	年 月 日
※お客様情報	ご住所 〒 お名前 電話（ ） —
※販売店	販売店名 電話（ ） —

※印欄は必ずご記入ください

症状の内容をできるだけ詳しくご記入ください

株式会社ジヴァスタジオ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11

TEL：0120-998-830 10：00-16：00（土日祝休）